

ScreenFect™ mRNA トランスフェクション プロトコール

細胞によってmRNAとトランスフェクション試薬の最適な混合比が異なります。数パターンの混合比を検討のうえ、最適な混合比の検証を推奨いたします。

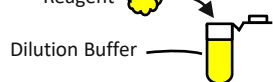
1-Step法 (リバーストランスフェクション法)

時間

実験工程


プロトコール 詳細

Reagent




Dilution BufferにScreenFect™ mRNA Reagent※1を添加する。
十分に混合する。
※1 添加前にポルテックスミキサーで十分混合する。

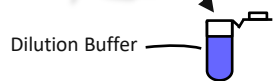mRNA



Dilution BufferにmRNAを添加する。
十分に混合する。

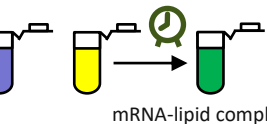


mRNA-lipid complex

希釈済みScreenFect™ mRNA Reagentと希釈済みmRNA溶液を混合する。
5分以上室温でインキュベートする。
*③以下の細胞懸濁液の調製とウェルプレートへの播きこみが完了するまでインキュベート可




Cultured cells

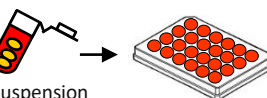トランスフェクションに必要な細胞を用意する。




Cell suspension

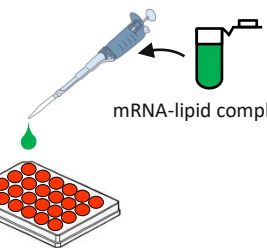トリプシンやAccutase®をもちいて細胞を剥離し、細胞懸濁液を調製する。
ウェルプレートや培養シャーレに必要な細胞数播く。



mRNA-lipid complex

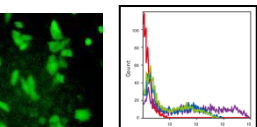工程2で調製したmRNA-lipid complexを上記工程で細胞懸濁液を添加した培養プレートに添加する。



蛍光観察、フローサイトメトリーなど各種手法によりトランスフェクション細胞を解析する。

コンポーネント	96-well		24-well		12-well		6-well	
Dilution Buffer for ScreenFect™ mRNA	5 µL		25 µL		50 µL		125 µL	
mRNA : Transfection Reagent 混合比	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 4
ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent	0.15 µL	0.2 µL	0.75 µL	1.0 µL	1.5 µL	2.0 µL	3.75 µL	5.0 µL
Dilution Buffer for ScreenFect™ mRNA	5 µL		25 µL		50 µL		125 µL	
mRNA (0.1-2.5 µg / µL)	50 ng		250 ng		500 ng		1250 ng	
希釈済み mRNA	5 µL		25 µL		50 µL		125 µL	
希釈済み ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent	5 µL		25 µL		50 µL		125 µL	
接着細胞 or 浮遊細胞	1.0-4.0 × 10 ⁴		0.5-2.0 × 10 ⁵		1.0-4.0 × 10 ⁵		0.25-1.0 × 10 ⁶	

細胞剥離 (Trypsin or Accutase®)

最終組成 [/well]	96-well	24-well	12-well	6-well
mRNA-lipid complex 量	10 µL	50 µL	100 µL	250 µL
mRNA 量	50 ng	250 ng	500 ng	1250 ng
ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent 量	0.15 or 0.2 µL	0.75 or 1.0 µL	1.5 or 2.0 µL	3.75 or 5.0 µL
培地量	100 µL	500 µL	1000 µL	2000 µL

1-3 日間、37°Cで細胞を培養し、目的に応じてアッセイを行う。

For support, please visit the
<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/01505.html>



1

2

3

4

5

6

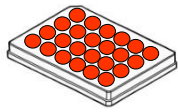
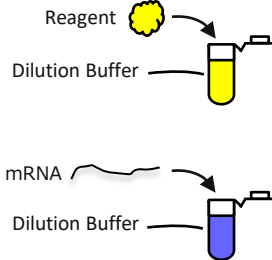

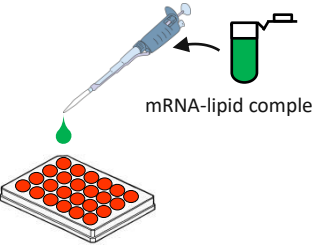
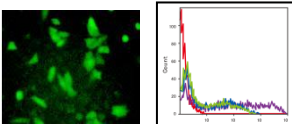
Day 0

Day 1~

ScreenFect™ mRNA トランスフェクション プロトコール

細胞によってmRNAとトランスフェクション試薬の最適な混合比が異なります。数パターンの混合比を検討のうえ、最適な混合比の検証を推奨いたします。

2-Step法 (フォワードトランスフェクション法)

時間	実験工程
1 Day 0  Pre-Cultured cells	トランスフェクション前に、細胞を70-90%コンフルエントまで培養する。
2  Reagent Dilution Buffer mRNA Dilution Buffer	Dilution BufferにScreenFect™ mRNA Reagent※1を添加する。十分に混合する。 ※1 添加前にボルテックスミキサーで十分混合する。 Dilution BufferにmRNAを添加する。十分に混合する。
3 Day 1  mRNA-lipid complex	希釈済みScreenFect™ mRNA Reagentと希釈済みmRNA溶液を混合する。5分以上室温でインキュベートする。※2 ※2 推奨時間: 15~20分
4  mRNA-lipid complex	mRNA-lipid complexを前培養細胞のウェルに添加する。
5 Day 2~ 	蛍光観察, フローサイトメトリーなど各種手法によりトランスフェクション細胞を解析する。

プロトコール 詳細								
コンポーネント	96-well	24-well	12-well	6-well				
接着細胞 or 浮遊細胞	1.0-4.0 × 10 ⁴	0.5-2.0 × 10 ⁵	1.0-4.0 × 10 ⁵	0.25-1.0 × 10 ⁶				
細胞を70-90%コンフルエントまで培養する。2-Step法の場合、培地交換を行うとトランスフェクション効率が改善する場合があります。								
Dilution Buffer for ScreenFect™ mRNA	5 μL	25 μL	50 μL	125 μL				
mRNA : Transfection Reagent 混合比	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 4	1 : 3	1 : 4		
ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent	0.15 μL	0.2 μL	0.75 μL	1.0 μL	1.5 μL	2.0 μL	3.75 μL	5.0 μL
Dilution Buffer for ScreenFect™ mRNA	5 μL	25 μL	50 μL	125 μL				
mRNA (0.1-2.5 μg / μL)	50 ng	250 ng	500 ng	1250 ng				
希釈済み mRNA	5 μL	25 μL	50 μL	125 μL				
希釈済み ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent	5 μL	25 μL	50 μL	125 μL				
最終組成 [/well]	96-well	24-well	12-well	6-well				
mRNA-lipid complex 量	10 μL	50 μL	100 μL	250 μL				
mRNA 量	50 ng	250 ng	500 ng	1250 ng				
ScreenFect™ mRNA Transfection Reagent 量	0.15 or 0.2 μL	0.75 or 1.0 μL	1.5 or 2.0 μL	3.75 or 5.0 μL				
培地量	100 μL	500 μL	1000 μL	2000 μL				

1-3日間、37°Cで細胞を培養し、目的に応じてアッセイを行う。

For support, please visit the <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/01505.html>

