

少量のローディングでもしっかり発色

ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-V

ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカーは色素結合タンパク質を含むSDS-PAGE用分子量マーカーです。

各タンパク質はすべて大腸菌発現の組換えタンパク質です。すべてのバンドに色素が結合しており、電気泳動中の各バンドの位置やメンブレンへの転写も目視で確認できます。

ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-Vは、ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-IIIよりも色数を増加したことで視認性が向上し、少量のローディングで鮮明なバンドが得られるようになりました。


■ 特長

- 少量のローディングで鮮明なバンドが得られる
- ゲルからメンブレンへのタンパク質の転写を目視で確認できる
- 電気泳動中にバンドの位置を確認できる
- 希釈、ボイルは不要

■ 製品仕様

	ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-V	ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-III
色数	5	3
バンド数	12	12
分子量範囲	11 - 250 kDa	11 - 245 kDa
推奨使用量	3 ~ 5 μ L/Lane	5 μ L/Lane

【分子量サイズの目安】

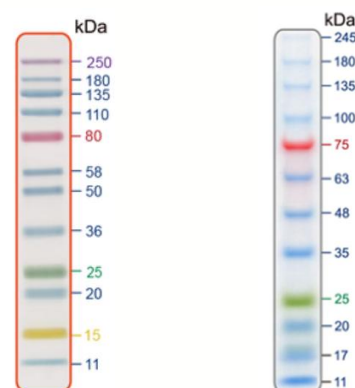

ワイドビュー™
プレステインたん白質
サイズマーカー-V

ワイドビュー™
プレステインたん白質
サイズマーカー-III

■ 使用方法

本製品を室温へ戻し、溶液が均一になるよう混合してからゲルへアプライしてください。

コード No.	製品名	規格	容量	希望納入価格 (円)
235-02813	ワイドビュー™ プレステインたん白質サイズマーカー-V	電気泳動用	25 μ L	4,200
239-02811			500 μ L	31,000
233-02814			500 μ L \times 3	75,000

