



γ線滅菌処理済み液体輸送・保管容器

ステリテナー+ プラス

3Dシングルユース滅菌バッグ



10-6

γ線滅菌処理済み

透過力が高く、安定した無菌性

ブロー一体成型

高レベルな耐久性と低溶出性を実現

バリデーション

高い信頼性と品質管理、すぐに運用可能

日本薬局方 (JP) / 米国薬局方 (USP Class VI) 適合



ステリテナーはグッドデザイン賞、キッズデザイン賞を受賞しました。

無菌性保証レベル(SAL) ≤ 10⁻⁶を達成

10⁻⁶


容器内の無菌環境が求められる、
医薬品などの保存・輸送に最適な
3Dシングルユース滅菌バッグです。
γ線滅菌処理を施し、
無菌状態でデリバリーいたします。



- バイオ医薬
- 再生医療
- 化粧品
- 機能性食品

γ線滅菌処理済み

γ線滅菌済みで、箱から出してすぐにご使用頂けますので、無菌溶液の調製および保管、移動など、バイオ医薬品の幅広いアプリケーションに最適なシングルユースバッグです。

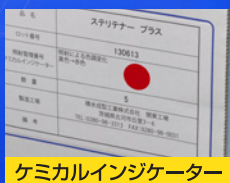

省スペース

20ℓ以下のシングルユースバッグではじめて3D形状を実現。無菌チャンバー内などの狭い場所でも設置可能。1枚ずつ個別包装したコンパクトな梱包で保管時も場所をとりません。



高強度設計

本体のみで自立する高強度設計により、かくはん作業をガラス容器に移し替えることなく行なえます。立方体形状により、溶液のかくはん時の溶解効率が高く、粉体培地の調整も短時間で可能。



取り扱いが容易

容器表面部に特殊エンボス加工を施したことで折れシワ、容器キズを防止し、輸送時の擦れキズを軽減します。溶液の色変化などが確認できるように、視認性の良い箇所に透明部を設けました。



ステリテナー+ プラス

Option

接続コネクタ

接続コネクタにより閉鎖系接続が可能。

3ポートコネクタ [γ線滅菌処理済み]

内容液排出、注入、エア用に使える3ポートコネクタ。チューブ径に合わせて2種類をご用意しました。無菌コネクタを併用することで一般環境でも閉鎖系の無菌接続が可能になります。接続コネクタは着脱が可能ですので様々なご使用場面に対応可能。2種類のコネクタを1パッケージにした滅菌済み個別包装でご提供します。



種別	ポート外径寸法とポート数
1/4インチタイプ	1/4インチ×3
3/8インチタイプ	3/8インチ×2 1/4インチ×1

3ポートコネクタASSY [γ線滅菌処理済み]



3ポートコネクタASSYは、3ポートコネクタにチューブ、カプラーをセットしたものです。滅菌済みですので、セットアップの手間なくシンプルな操作で無菌接続が可能になり、他の機器と閉鎖系接続により汚染リスクを低減します。1/4インチおよび3/8インチの2タイプをご用意しておりますので、多様な使用場面でお使い頂けます。

ラック・コンテナ

作業性・保管性を高める専用設計。

設置用ラック (10ℓ・20ℓ用)

ステリテナーへの溶液の注入や排出を楽にできる10ℓ・20ℓ兼用の省スペース型ラック。ワンタッチ操作で容器を上下反転することで、残液を完全に排出できます。



保管用外装コンテナ「RIC」

ステリテナーを内容液入りで段積み保管ができるプラスチック製外装コンテナ。透明化により視認性を向上しました。コンテナに収納した状態で拠点間の輸送が可能です。



製品仕様

仕様	品名	容量(ℓ)	内容器寸法(mm)	梱包数量
ステリテナープラス 個別包装	SR-05S	5	190×190×190H	10枚 (5枚×2箱)
	SR-10S	10	230×230×230H	
	SR-20S	20	285×285×285H	
ステリテナープラス 3ポートコネクタセット	SR-05P	5	190×190×190H	10枚 (5枚×2箱)
	SR-10P	10	230×230×230H	
	SR-20P	20	285×285×285H	

□ 梱装箱寸法(mm) 外箱: 400×295×295H / 内箱: 279×279×183H

仕様	品名	容量(ℓ)	内容器寸法(mm)	梱包数量
ステリテナープラス 3ポートコネクタASSYセット [1/4インチタイプ]	SR-05A (1/4)	5	190×190×190H	5枚+ 5ASSY
	SR-10A (1/4)	10	230×230×230H	
	SR-20A (1/4)	20	285×285×285H	
ステリテナープラス 3ポートコネクタASSYセット [3/8インチタイプ]	SR-05A (3/8)	5	190×190×190H	5枚+ 5ASSY
	SR-10A (3/8)	10	230×230×230H	
	SR-20A (3/8)	20	285×285×285H	

スマート
フォン対応

ホームページをご覧ください。

カタログ、事例資料のダウンロード、製品動画などをご覧いただけます。

パソコン・スマートフォン・タブレットから

<https://www.sekisuseikei.co.jp/cp/>



積水成型工業株式会社 SEKISUI SEIKEI CO., LTD.

〒530-6125 大阪府北区中之島三丁目3番23号(中之島ダイビル25F)

お客様相談室 ☎ 0120-393-756

<https://www.sekisuseikei.co.jp/> ステリテナープラス 検索

*印刷のため、色調は実物と異なることがあります。*改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。